




DRIVER VERSION: 11.4.0.393

Gibertini USB_Driver_WINDOWS


INSTALLAZIONE DRIVER USB
GIBERTINI

GIBERTINI USB DRIVER
INSTALLATION

ITALIANO		ENGLISH	
<ul style="list-style-type: none">Inserire il CD del prodotto nell'unità CD-ROM del computer e accedere alla cartella: 'CD Driver_Rel 11.4.0.393'		<ul style="list-style-type: none">Insert the product CD into your computer's CD-ROM drive and navigate to the folder: 'CD Driver_Rel 11.4.0.393'	
<ul style="list-style-type: none">Selezionare il 'silabser.inf' (in alcuni sistemi la desinenza 'inf' potrebbe essere nascosta) con il pulsante destro del mouse e selezionare l'opzione 'Installa'.		<ul style="list-style-type: none">Select 'silabser.inf' (on some systems the 'inf' ending may be hidden) with the right mouse button and select the 'Install' option.	

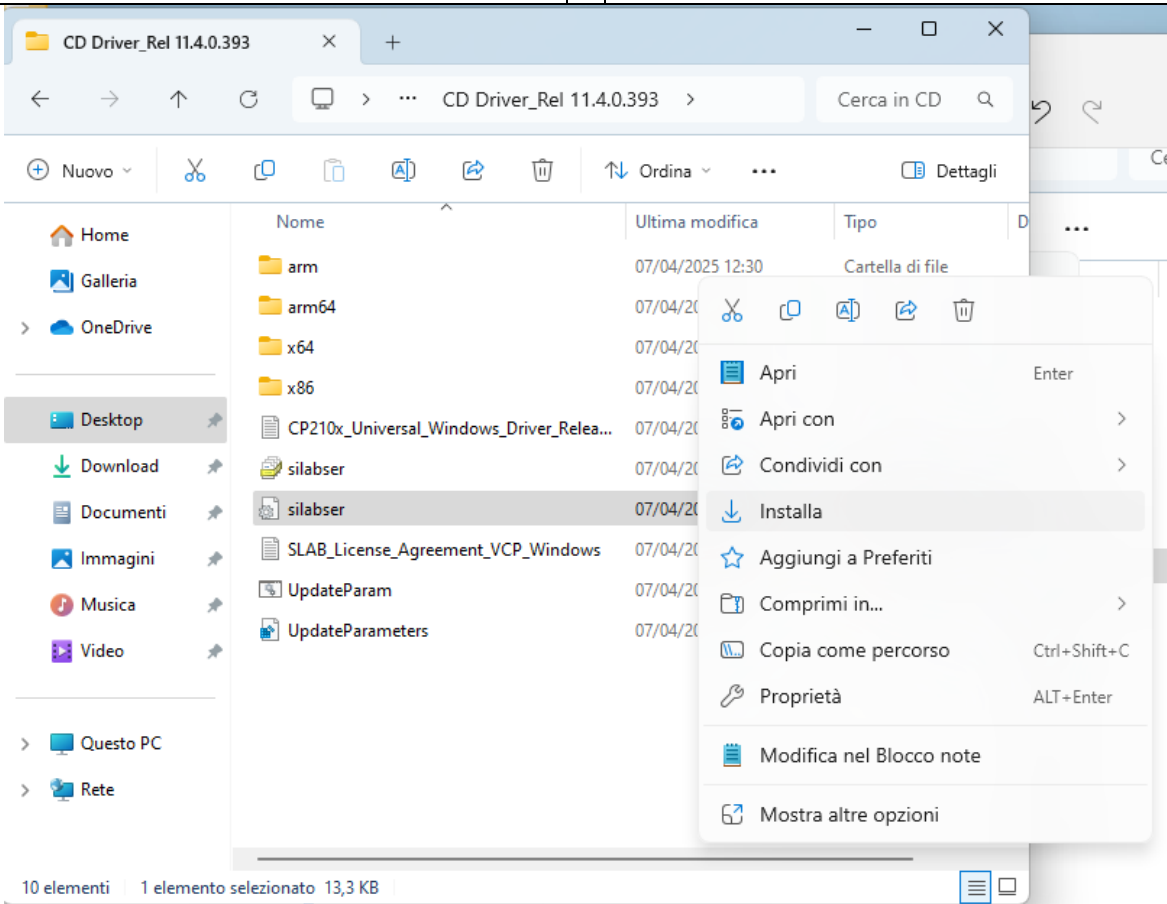

The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'CD Driver_Rel 11.4.0.393'. The address bar shows the path 'CD Driver_Rel 11.4.0.393'. The left sidebar shows the 'Desktop' location. The main pane displays a list of files and folders: 'arm', 'arm64', 'x64', 'x86', 'CP210x_Universal_Windows_Driver_Relea...', 'silabser', 'SLAB_License_Agreement_VCP_Windows', 'UpdateParam', and 'UpdateParameters'. The 'silabser' file is selected. A right-click context menu is open over the 'silabser' file, showing options like 'Apri', 'Apri con', 'Condividi con', 'Installa', 'Aggiungi a Preferiti', 'Comprimi in...', 'Copia come percorso', 'Proprietà', 'Modifica nel Blocco note', and 'Mostra altre opzioni'. The 'Installa' option is highlighted.
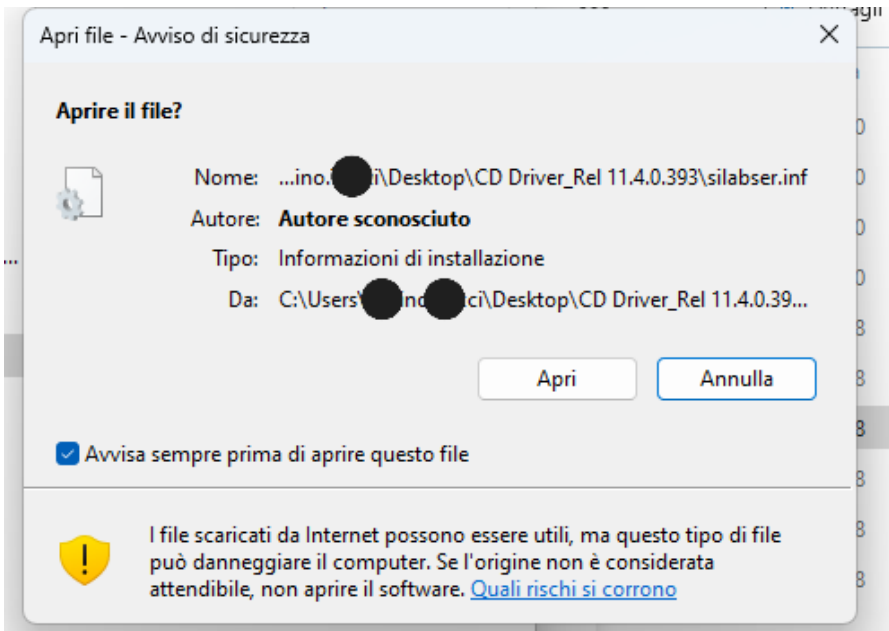
<ul style="list-style-type: none"> Il sistema dovrebbe visualizzare la schermata di conferma per l'apertura del file, selezionare 'Apri' per consentire l'installazione. 	<ul style="list-style-type: none"> The system should display the confirmation screen to open the file, select 'Open' to allow the installation.
<div data-bbox="343 539 1236 1167" data-label="Image">  </div>	
<ul style="list-style-type: none"> In caso di successive richieste di conferma autorizzare sempre per proseguire fino al termine dell'installazione. 	<ul style="list-style-type: none"> In case of subsequent confirmation requests, always authorize to continue until the installation is complete.